




Vista Plus är NOVACORs nya Holter inspelningsenhet. Det är den mest patient- och användarvänliga Holter inspelningsenheten på marknaden, helt i anda med NOVACORs känsla för teknisk innovation och design.

### Patientvänlig



Inspekningsenheten kan bäras på ovanstående sätt, helt enkelt vad som passar patienten bäst.

Snabb och enkel "start-up"

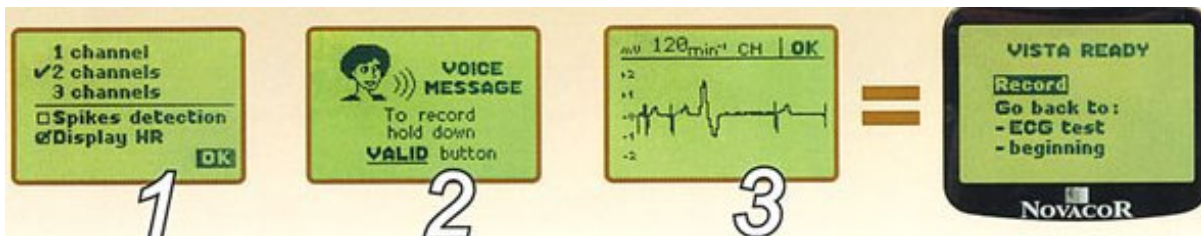

Du väljer direkt i displayen hur många kanaler du vill spela in. Röstinspelnings-ID spelas in och sparas på CF-kortet, allt för en god säkerhet. Visuellt EKG vid påkoppling, realtids-EKG och hjärtfrekvenstrend när som helst under inspelningen. Färdig!

Vista lagrar sitt data på högkapacitets "Compact Flash", sk CF-kort, upp till 512MB. Detta eliminerar behovet för komprimering och gör det fullt kompatibelt med framtidens utveckling av minneskapacitet.



Vista garanterar hög signalkvalitet, med 200 Hz sampling och lagringsfrekvens med 10 bit och dynamiskt omfång på +/- 6mV är Vista en av de främsta på marknaden idag.

## **Vista Plus** fortsättning

### **Flexibla inspelningsmöjligheter**

Vista ger valmöjligheter för hur länge du vill registrera EKG.

Beroende på hur länge och hur många kanaler man vill spela in, finns 3 alternativ.

3 kanaler - 8 dagar

1& 2 kanaler - 11 dagar

Med 1 eller 2 kanaler kan du registrera kontinuerligt EKG upp till 11 dygn!

3 kanaler kan registreras 8 dygn.

Detta väljer man direkt i displayen på inspelningsenheten vid uppkoppling på patient.

Brett och användarvänligt mjukvaruprogram - med nya optionen Sömnapné!

Med HolterSoft Ultima kan du analysera snabbt och med många alternativa möjligheter.

Bl.a görs analyser av RR-variabilitet, hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), QT-analys, arytmihändelser, förmaksflimmer, ST-förändringar, sömnapnédetektion m.m.

